

Derilla Sass

SPA - MEDICAL



55 2390 7756



ventas@derillasass.com
gamuroli@gmail.com



www.derillasass.com



AngelSkin



ANGELSKIN



Máquina láser de picosegundo

Eliminación de tatuajes y
rejuvenecimiento de la piel

BM23

BM23 puede eliminar tatuajes y devolverle su piel y su confianza.

Usando altas energías, BM23 rompe los pigmentos y los barre usando la flexibilidad de las acciones de cuatro ondas. Rejuvenecimiento de la piel para mejorar la textura laxitud y el tono.

Y BM23 no discrimina sobre el color. El color de tu mancha o el color de tu piel.

Es el más alto nivel de experiencia, tecnología e innovación.

BM23 permite que la piel comience nuevamente y despeja el camino para mañana.

Energía alta

Se absorben pulsos láser muy cortos en las áreas objetivo de la piel, lo que provoca la conversión de la energía de la luz en ondas acústicas que rompen los gránulos de tinta / pigmento en un proceso que es rápido y efectivo.

Los altos niveles de energía del láser BM23 picosegundo permiten la eliminación de pigmentos / tatuajes con menos tratamientos en comparación con otros sistemas láser de la competencia.



3 longitudes de onda: para la destrucción efectiva de los pigmentos / colores de tinta más populares y el rejuvenecimiento de la piel

Tiene 3 longitudes de onda, 532 nm, 755 nm y 1064 nm.



- 532nm: eliminar delineador de ojos, labio, marca de nacimiento diluida, tatuaje de color, punto poco profundo.
- 755 nm: rejuvenecimiento de nido de abeja. Eliminación de manchas de la edad, cloasma, manchas hepáticas, pecas, quemaduras solares, lunares negros y rojos.
- 1064 nm: eliminación de pecas, labios, pigmentación, cejas, delineador de ojos.



Picosecond puede eliminar tatuajes y devolverle su piel y su confianza.

Acerca del láser de picosegundo

CARACTERISTICAS

Picosegundo, menos inyecciones, tratamiento más rápido y mejor eficacia.

La alta velocidad del picosegundo divide los grandes trozos de células de tejido en pedazos más pequeños.

Picosecond Nd: YAG Laser 1064nm y 755nm y 532nm + 1320nm


Alta energía y tratamiento rápido

En poco tiempo con alta potencia, elimina claramente el pigmento.
(Tatuaje, lesión de pigmento epidérmico y dérmico).


Comodidad y seguridad

Es eficaz y seguro en el tratamiento de diversos pigmentos y pigmentos refractarios porque El picosegundo minimiza el daño a la piel para eliminar el pigmento al apuntar con precisión el punto objetivo.

Láser tradicional: partículas pequeñas.

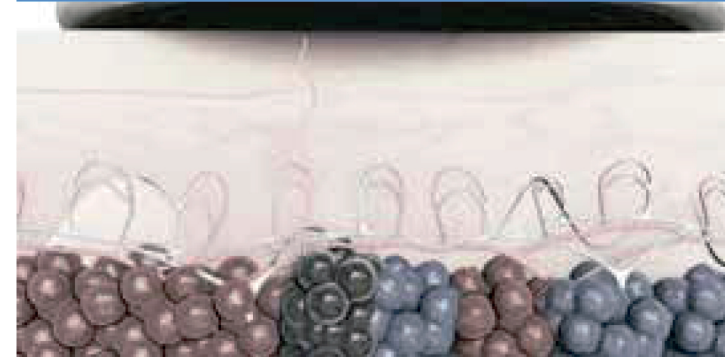


Tatúe las partículas de tinta antes del tratamiento con tecnología láser tradicional.

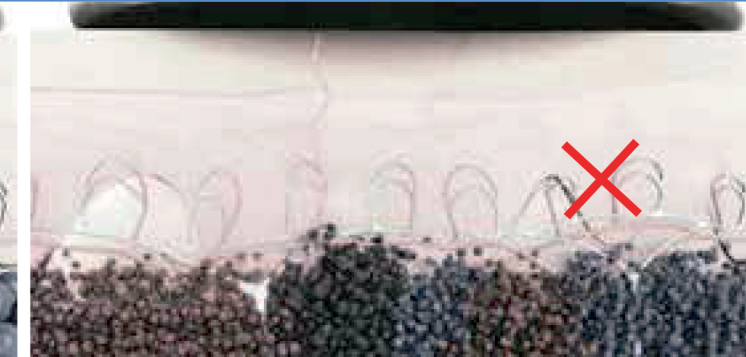


El láser tradicional tiene proporcionalmente más acción fototérmica, que calienta el pigmento y el tejido circundante.

VS

Picosegundo: partículas minúsculas

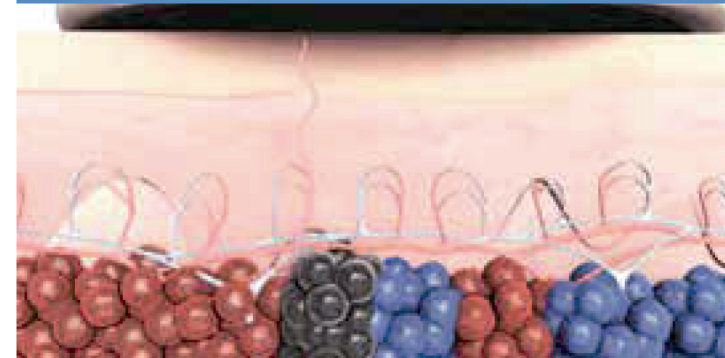


Tatúe las partículas de tinta antes del tratamiento con la tecnología Picosecond.

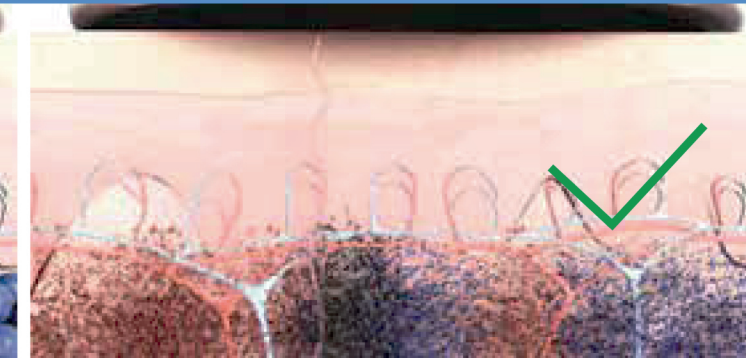


La tecnología de picosegundos rompe el pigmento en partículas minúsculas que el cuerpo puede eliminar fácilmente.


Principio de funcionamiento

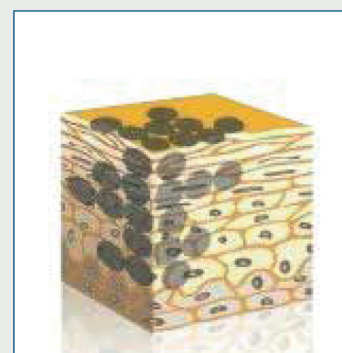

Melanina en la piel

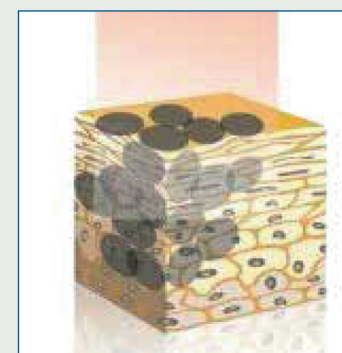

La melanina se expande al absorber la energía del láser

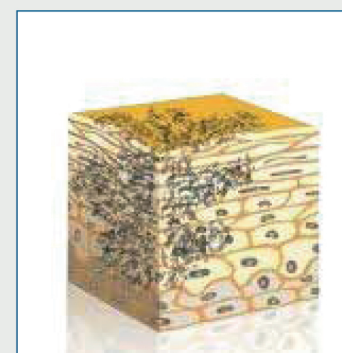

La melanina está fragmentada



Se extraen pedazos de melanina del cuerpo




Picosecond Laser 6 Effect




Poros

Grueso y no puede permitirse el envejecimiento de los poros, a través del curso del tratamiento, se puede ver 1 después del efecto de reducción

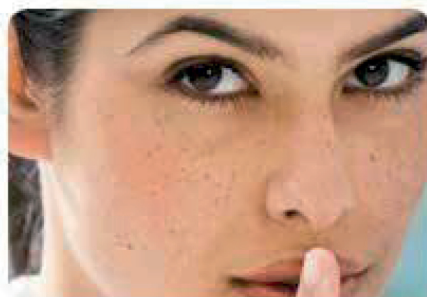

Lugar

El láser de picosegundo se puede quitar fácilmente, no tiene que preocuparse por el anti-negro, mientras que las manchas difíciles en la cara se pueden resolver.

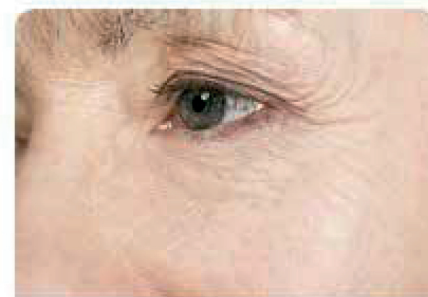


Lineas finas

Cuidado de la piel más crema para los ojos no puede eliminar las líneas finas del ojo, a través del tratamiento con láser de picosegundo en forma de panal, un corto tiempo para sentir la diferencia.




Cicatriz

El láser de matriz de puntos golpeado varias veces todavía no se puede mejorar por completo en la cicatriz obstinada, por lo que la cara del láser de picosegundo del hoyo solo se puede restaurar unas pocas veces.

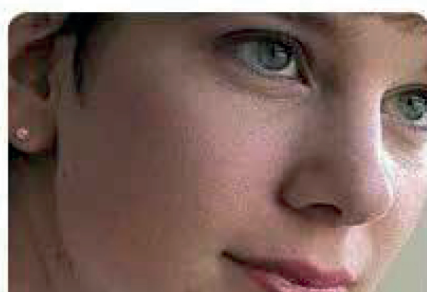

Cara tonta

Debido a que el láser de picosegundo en el excelente efecto de la melanina, mientras clínica encontró que la experiencia del final de la piel se vuelve resbalosa y sensible.

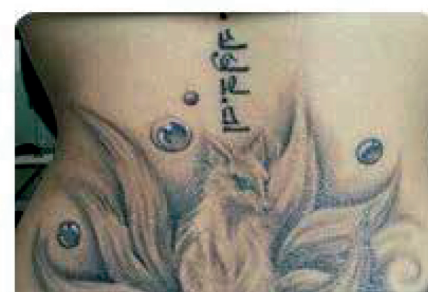


Tatuaje


El tratamiento con láser tradicional de los tatuajes deficientes (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y azul) se puede eliminar mediante la limpieza con láser de picosegundos, sin dejar rastros.

Antes y después de


Es hora de poner tu mejor pie adelante, deshacer ese tatuaje.

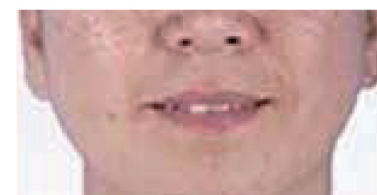


antes de

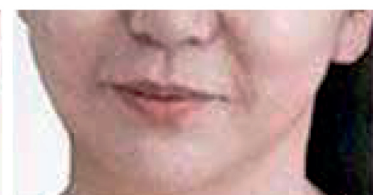


Después

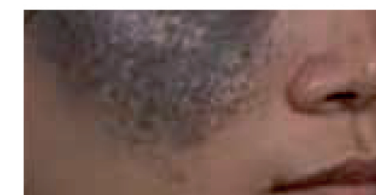


antes de

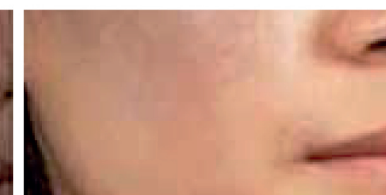


Después

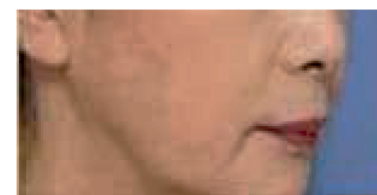

antes de

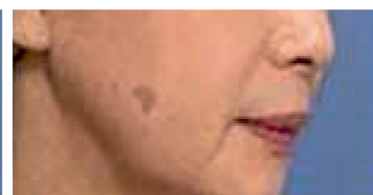

Después




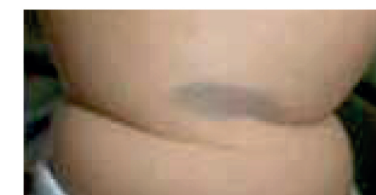


antes de



Después

Efecto significativo del tratamiento

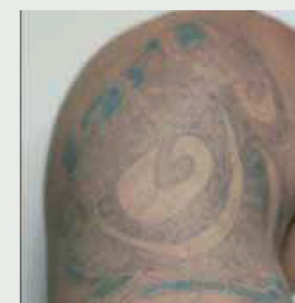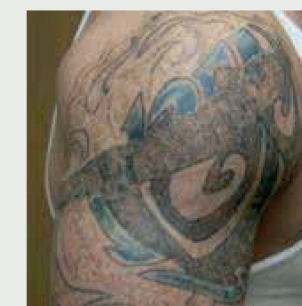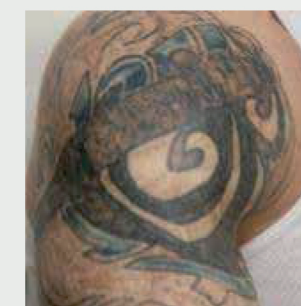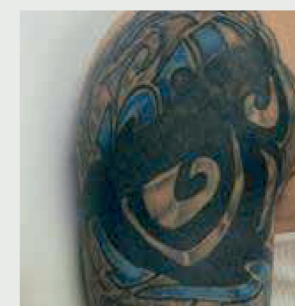

Habilidades operativas del sistema de tatuaje Picosecond

Artículos	Veces	Intervalo	aviso
Ceja	1~2	30-60 días	Elimina el vello de las cejas y protege los globos oculares
Párpado	1~3	45-60 días	Elimina el vello de las cejas y protege los globos oculares
Contorno de labios	1~3	15-45 días	Utiliza un espejo de 532mn
Tatuaje Corporal	1~4	30-60 días	Exudar sangre es efectiva
Manchas, lugar envejecido	1~5	15-30 días	Exudar sangre es efectiva
Mancha de nacimiento	3~7	45-90 días	Exudar sangre es efectiva

Imagen detallada



Eliminación de tatuajes con láser de picosegundo

Especificación del sistema ▼

Teoría de trabajo	Láser de picosegundo
Longitud de onda	532nm, 755nm 1064nm
Función	Eliminación de tatuajes, eliminación de manchas, rejuvenecimiento de la piel.
Solicitud	Salón de belleza y clínica
voltaje	100V - 240V 50/60Hz

