


Mejorador de piel profesional Er: Yag laser 2940nm

Principio:

El láser Er: YAG (longitud de onda 2940nm) es un láser de estado sólido. A medida que el pico de alta absorción al agua a esta longitud de onda, la piel se calentará rápidamente mientras trabaja con el láser Er: YAG y se desprenderá instantáneamente de los tejidos patológicos. El tratamiento presenta solo una profundidad de exposición superficial; por lo tanto, la parte afectada se puede curar casi sin tiempo de recuperación.

Breve introducción:

Láser fraccional (Pixel): adopta varios puntos enfocados en la tecnología láser, cada pulso láser está formado por unos 100 pulsos micro láser en el tamaño de 75-100um ¡Es una forma completamente nueva y segura de rejuvenecimiento con láser!

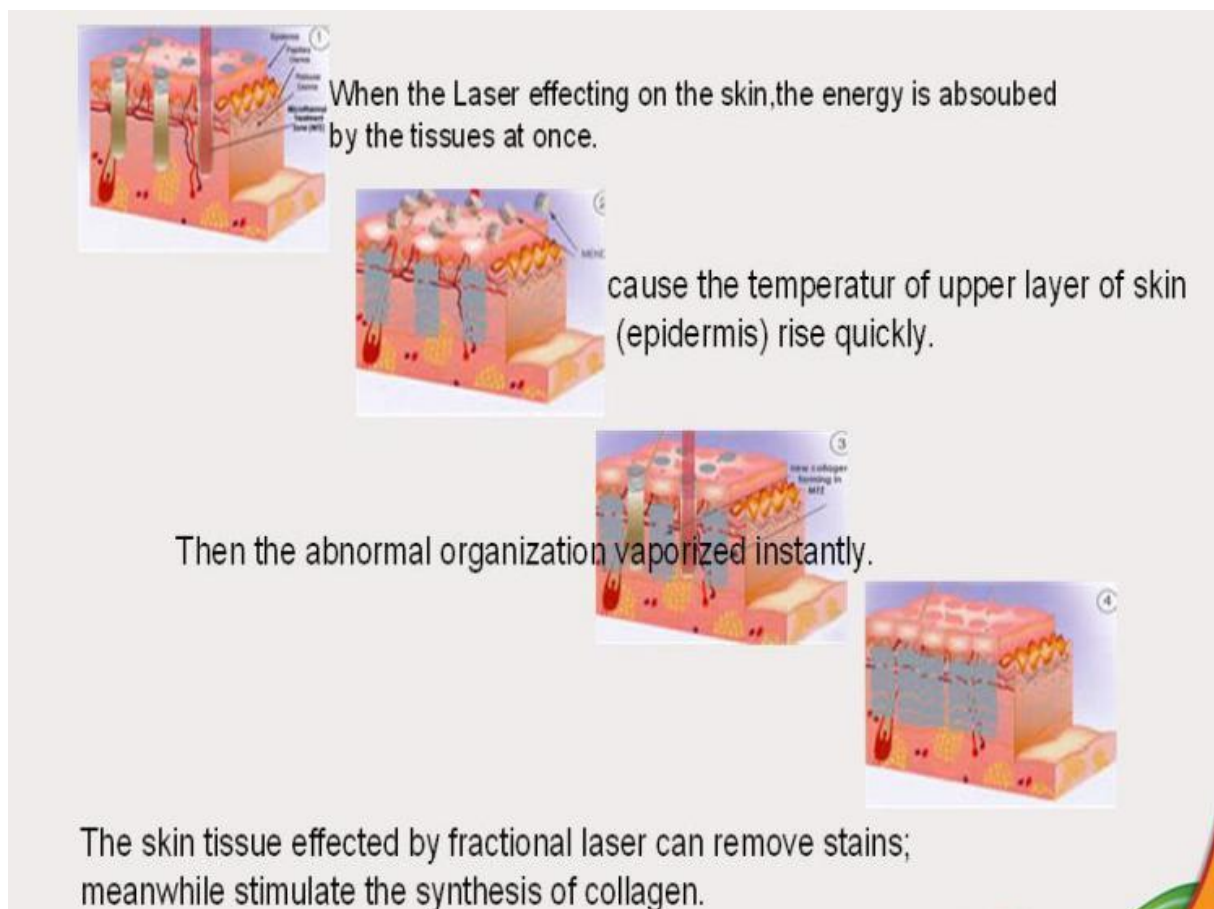

Características:

1. Una opción de rejuvenecimiento de la piel con poco tiempo de inactividad, los pacientes generalmente pueden regresar a sus actividades diarias con un mínimo enrojecimiento o molestia.
2. Las columnas fraccionadas evitan la acumulación innecesaria de calor, a diferencia del método de envío más doloroso de los dispositivos de escaneo.
3. No requiere anestesia tópica ni aplicación de tinte, lo que minimiza el tiempo de preparación y limpieza.
4. El tratamiento con láser fraccional es seguro para la mayoría de los tipos de piel, lo que incluye los tipos de piel IV y V de Fitzpatrick; Asiático, indio, hispano y piel negra en tonos más claros.

Ventajas:

- SystemEl sistema de salida láser en la empuñadura garantiza que la energía sea suficiente sin perder en comparación con la transmisión de fibra óptica;
- LaserEl láser externo es conveniente para el mantenimiento y reemplazo después de la venta;
- 2 tipos diferentes de salida de micro matrices, que satisfacen los diferentes tratamientos y necesidades de los pacientes;
- Pantalla táctil LED de 8,4 pulgadas, fácil de operar con teclado suave;
- SystemSistema de registro de clientes, para la información de parámetros de tratamiento de cada cliente;
- Después de 3-5 veces, el resultado será perfecto y durará mucho tiempo.
- JustSólo necesita 20-25 minutos para toda la cara y 5-10 minutos para las partes, lo que ahorra tiempo tanto para los médicos como para los pacientes.
- El enfoque principal es intuitivo y específico, no se pierde en ninguna parte y no necesita ningún otro cuidado adicional después de la operación.

Parámetros:

Tipo de laser	Er: Yag laser
Longitud de onda	2940nm
MTZs Energía y densidad	81 , 49 MTZs/cm2
Energía por puerto	4-20mj / MTZ (9x9) 12-28mj / MTZ (7x7) 500-2000mj (corte)
Energía de salida	392-1274mj
Tamaño de Microlens Array	10*10mm
Ancho de pulso	Corto, Medio, Largo
Tasa de repetición	1 Hz, 2HZ
Pantalla	Pantalla táctil de 8,4 pulgadas
Sistemas de enfriamiento	Sistema de enfriamiento de agua y sistema de enfriamiento de aire
Período de trabajo	Continuamente en modo stand-by durante 24 horas.
Requisitos eléctricos	100/110V 50-60Hz or 230-260V, 50-60Hz

Imágenes del detalle:


Máquina:



Pieza de mano:



Pantalla:

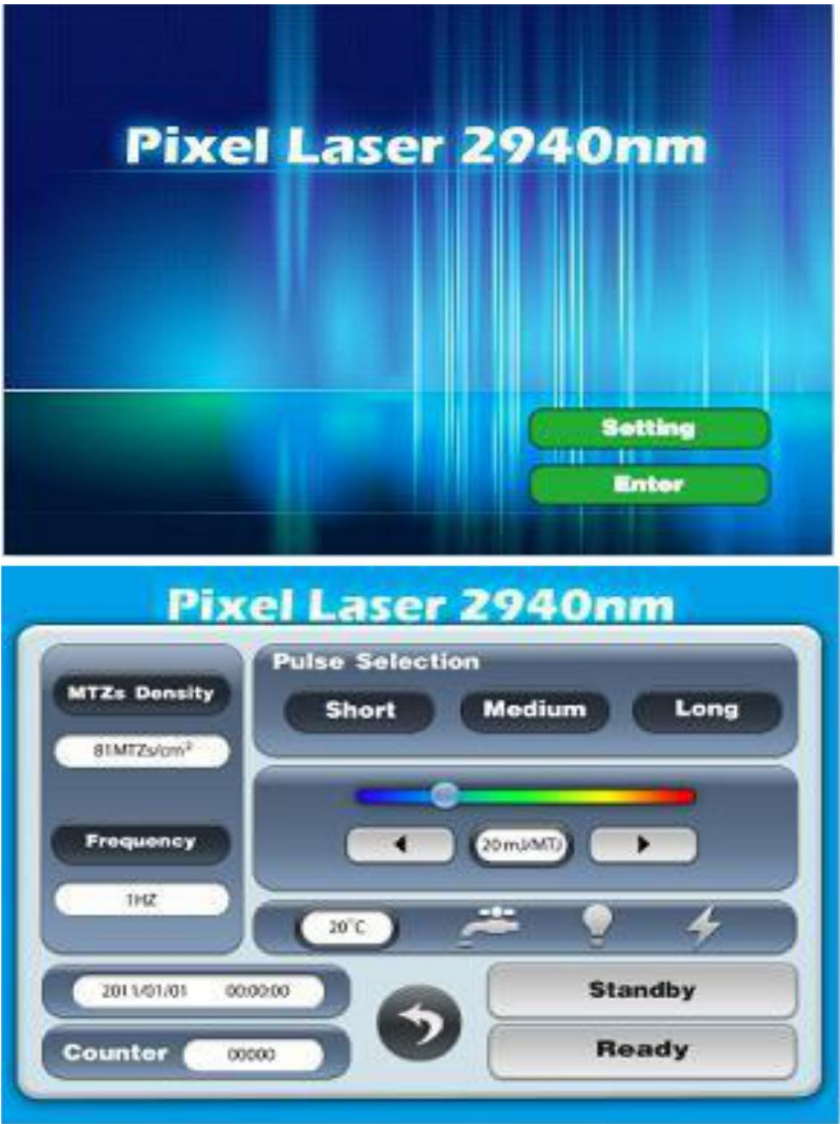

Exploración:



Antes después



Contactos:



55 2390 7756



ventas@derillasass.com
gamuroli@gmail.com



www.derillasass.com



AngelSkin



ANGELSKIN